

Belangrijk!





De electrode-cassette van uw AED moet direct vervangen worden!

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze brief treft u de nieuwe cassette aan. Om te voorkomen dat uw AED niet bruikbaar is op het moment dat elke seconde telt, hebben wij het volgende advies:

Vervang de electrode-cassette direct!

1. Haal de nieuwe electrode-cassette uit de wit/rode verpakking.
2. Plak de bijgeleverde sticker met tekst 'TREKKEN' over de plek op de cassette waar nu 'PULL' staat.
3. Laat de batterij *in* de AED bij het vervangen van de electrode-cassette.
4. Schuif de vergrendeling aan de bovenzijde van uw AED opzij. Neem de oude electrode-cassette uit het apparaat.
5. Na het verwijderen van de electrode-cassette zal de AED een piep geven en melden '*plaats een nieuwe electrode-cassette*'.
6. Plaats eerst de onderkant van de nieuwe cassette in het cassettecompartiment.
7. Druk de cassette stevig aan totdat de cassette op zijn plaats klikt.
8. Als de cassette is geplaatst geeft de AED een piep en meldt de AED '*electrodes voor volwassenen, in geval van nood druk op de groene aan/uit knop*'.
Wacht even af, na enige tijd gaat het groene lampje (rechtsboven de aan/uit knop) knipperen.
9. Doe de AED terug in de rode draagtas, uw AED is weer klaar voor gebruik.

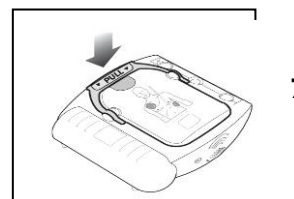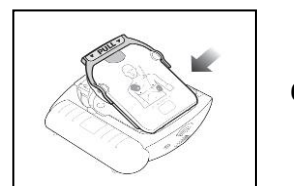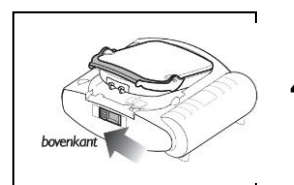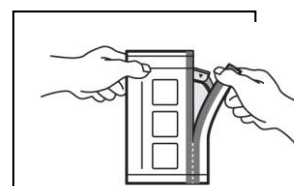

10. Waarschuw uw medegebruikers dat zij nooit zomaar de gesealde verpakking van de electrode-cassette mogen openen. De elektroden zullen hierdoor hun kleefkracht verliezen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
ProCardio